


Betriebsstunden ablesen: Sauerstoffkonzentrator Typ SimplyGo Mini mobil®
14.24.06.1004 / 14.24.06.1007

Oben-Schräg-Ansicht



Display Ansicht:

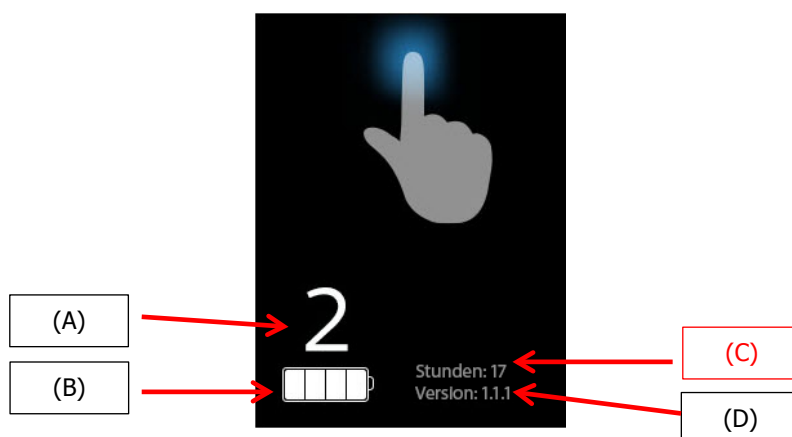

AbleSEN:

1. Sie können den Hauptschalter betätigen oder einfach die schwarze Bildschirmanzeige am Gerät berühren, um Ihre Einstellungen schnell zu überprüfen. Der hier gezeigte Bildschirm mit den folgenden Informationen erscheint:

- O₂-Einstellungen (A)
- Akkukapazität (B)
- **Betriebsdauer des Geräts in Stunden (C)**
- Version der Software (D)

Der Bildschirm wird sich automatisch nach 5 Sekunden ausschalten.