

## Swift™ FX Nano



Swift FX Nano ist eine neuartige Nasenmaske mit weichem, schmalen Maskenkissen und einem dezenten Kopfband für ein freies Gesichtsfeld. Auf so viel Tragekomfort haben Ihre Patienten schon lange gewartet!

### Vorteile für Sie ...

#### **Die Stärken von Swift FX**

Die Swift FX Nano baut auf bekannten Eigenschaften der Swift FX auf. Sie zeichnet sich durch kompakte Form, ein freies Gesichtsfeld, Zuverlässigkeit und Tragekomfort aus und ermöglicht unbeschwerte Atmung über ein Maskenkissen.

#### **Einmal angepasst, immer einsatzbereit**

Die Maske ist im Nu angepasst. Korrekturen sind meist nur geringfügig oder gar nicht erforderlich – das spart Zeit, Geld und zusätzliche Patientenbesuche.

#### **Einfach zu reinigen und zu handhaben**

Mit nur drei Hauptkomponenten – Kopfband, Maskenkissen und Schlauch – besteht die Swift FX Nano aus weniger Teilen als die meisten anderen Nasenmasken und ist daher besonders einfach zu handhaben.

#### **Bequem und dicht auch bei Bewegung**

Das um 360° drehbare Kniestück erhält die Dichtigkeit bei Bewegung und sorgt für hohen Tragekomfort in allen Schlafpositionen.

### ... und Ihre Patienten

#### **Leicht und natürlich**

Die Swift FX Nano verbindet den natürlichen Atemkomfort einer Nasenmaske mit der Leichtigkeit der Swift FX Nasenpolstermaske.

#### **Brillentragen kein Problem**

Die Swift FX Nano schränkt das Gesichtsfeld nicht ein, so dass Patienten beim Fernsehen oder Lesen unter Therapie problemlos ihre Brille tragen können.

#### **Schlafposition frei wählbar**

Die Swift FX Nano passt sich flexibel den Bewegungen im Schlaf an, sodass die Schlafposition beliebig gewählt werden kann und der hohe Tragekomfort jederzeit erhalten bleibt.

#### **Überraschend leise**

Die innovative Ausatemöffnung verteilt den Luftstrom so effektiv, dass die Geräuscentwicklung der Maske bei nur 25 dBA liegt.\*

\* Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert (mit einem Unsicherheitsfaktor von 3 dBA) gemäß ISO 4871:1996.



**Swift™ FX Nano**  
**Swift™ FX Nano for Her**  
NASENMASKE



## Klein, leicht und attraktiv

Ganz ohne festen Rahmen oder Stirnstützen ist die Swift FX Nano mit ihrem offenen Design und dem dezenten 2-Punkt-Kopfband ein echtes Leichtgewicht. Komfortpolster können optional mit dem Kopfband verwendet werden.

Möglichst klein, möglichst wenig spürbar und möglichst bequem – so sieht die Maske aus, nach der die meisten Schlafapnoepatienten suchen. Mit der Swift FX Nano können sie jetzt den natürlichen Atemkomfort einer Nasenmaske verbunden mit einer attraktiven kompakten Form erfahren.

### Einfache Handhabung

Der obere Clip rastet sicher in das Außenprofil des Kopfbandes ein. Einmal einstellen genügt!

### Flexible Feineinstellung

Flaches hinteres Band mit Verschlüssen

### Weiches, flexibles Maskenkissen

Doppelwandige Ausführung und Luftfedertechnologie sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und bewirken eine sanfte und komfortable Abdichtung.

### Um 360° drehbares Kniestück


ermöglicht eine flexible Lage des Schlauches

### Flüsterleise Ausatemöffnungen

leiten die Luft leise ab – weg von Patient und Partner

### Innovativer Schlauchansatz

entkoppelt das Drehmoment, sodass der Schlauch unabhängig vom Kniestück beweglich ist

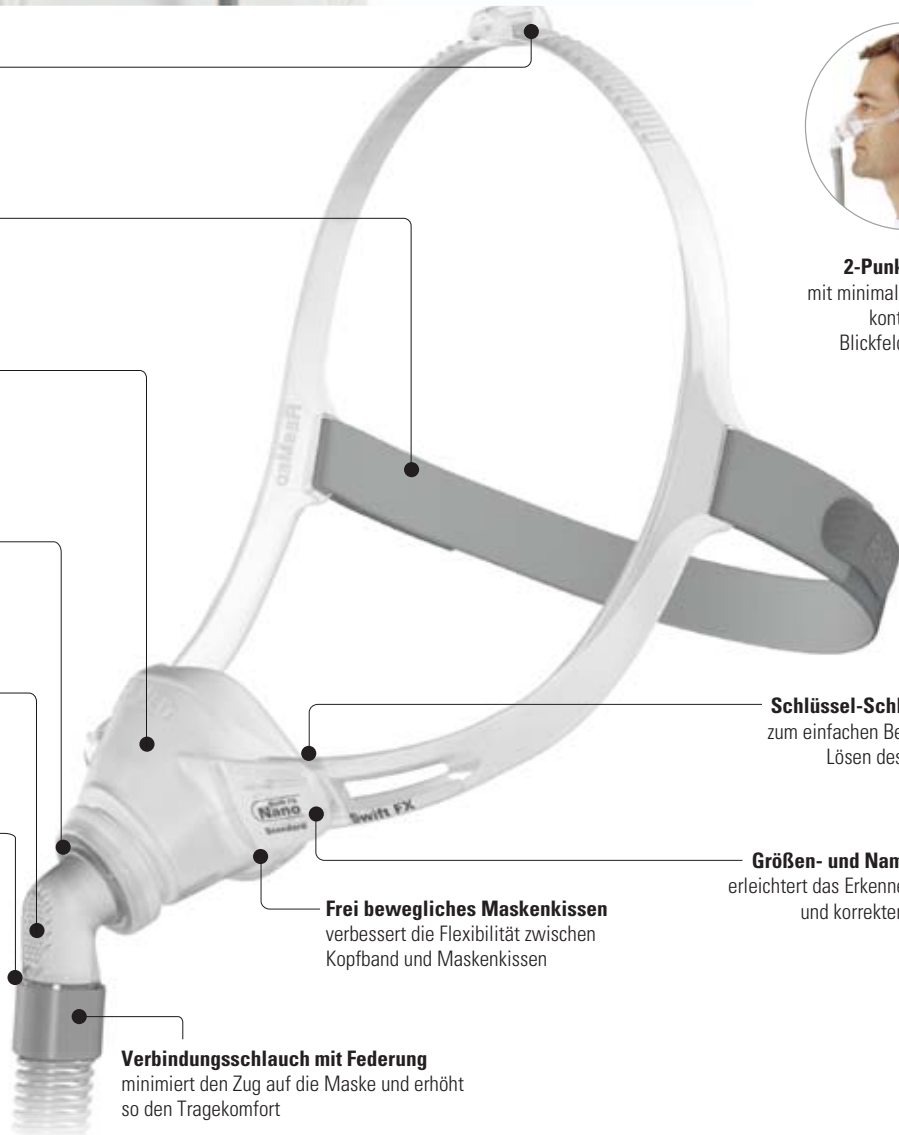

**2-Punkt-Kopfband**  
mit minimalem Gesichtskontakt lässt das Blickfeld rundum frei

**Schlüssel-Schloss-Prinzip**  
zum einfachen Befestigen und Lösen des Kopfbandes

**Größen- und Namensangabe**  
erleichtert das Erkennen von Größe und korrekter Ausrichtung

**Frei bewegliches Maskenkissen**  
verbessert die Flexibilität zwischen Kopfband und Maskenkissen

**Verbindungsschlauch mit Federung**  
minimiert den Zug auf die Maske und erhöht so den Tragekomfort

## Artikelnummern

Swift FX Nano for Her Maskensystem* (Small)	<b>62203</b>
Swift FX Nano Maskensystem** (Standard)	<b>62202</b>
Swift FX Nano Maskensystem** (Wide)	<b>62253</b>

\* Umfasst Maskenkissen (Small), Schlauch und Kniestück (pink) und Swift FX Nano for Her Kopfbandsatz (pink).

\*\* Umfasst Maskenkissen (Standard oder Wide), Schlauch und Kniestück (grau) und Swift FX Nano Kopfbandsatz (grau).

**Swift™ FX Nano**  
**Swift™ FX Nano for Her**  
NASENMASKE